

SICCOSTIL[®]

CROSS

ACIDO IALURONICO 0,15%
CROSS LINKATO
E LIPOSOMI



GOCCE OCULARI

STERILI LUBRIFICANTI
SENZA CONSERVANTI



SICCOSTIL CROSS gocce è una soluzione oftalmica senza conservanti, indicata per **cani, gatti, cavalli non DPA e conigli d'affezione**. Sodio ialuronato (Acido ialuronico) è un componente viscoelastico naturalmente presente nelle strutture oculari e la forma cross-linkata (reticolata) è una forma specificamente sviluppata per ottenere una molecola ad elevata stabilità con una peculiare resistenza alla degradazione e con caratteristiche specifiche per applicazione oftalmica.

I liposomi a matrice fosfolipidica (bilayer fosfolipidici) sono strutture a doppio strato di fosfolipidi, contribuiscono a prevenire l'evaporazione rapida delle molecole di acqua dal film lacrimale, favorendone la stabilità e la persistenza sulla superficie oculare.

La sinergia delle componenti forma una barriera difensiva viscoelastica e idratante che per le sue proprietà, dona sollievo immediato in caso di secchezza oculare di lieve-moderata entità e di stress ambientale associato.

COMPOSIZIONE: Acqua depurata, fosfolipidi di soia (Liposomi) 5%, Acido bórico, Sodio cloruro, Sodio ialuronato cross-linkato 0,15%, Sodio tetraborato, Disodio edetato.

MODALITÀ D'USO

- Rimuovere l'anello di sicurezza sollevando la linguetta, togliere il cappuccio del flacone e prenderlo tra pollice e indice della mano dominante.
- Tenere ferma la testa dell'animale contenendo il muso con la mano non dominante,
- posizionare la mano dominante di lato sopra la testa dell'animale in modo da poter tirare lievemente con il bordo esterno del mignolo la palpebra superiore per facilitare l'esposizione dell'occhio,
- posizionare il flacone sopra l'occhio ed instillare 1-2 gocce della soluzione nell'occhio 2-3 volte al giorno esercitando una leggera pressione sul corpo del flacone.
- Premiare l'animale dopo l'applicazione


MISURE PRECAUZIONALI E AVVERTENZE

- Prodotto oftalmico per uso esterno veterinario.
- Evitare di toccare l'occhio con la punta del flacone.
- Non utilizzare il prodotto dopo la data di scadenza riportata sulla confezione.
- Lasciar trascorrere 10-15 minuti tra l'instillazione di Siccostil Cross e l'eventuale instillazione di farmaci o prodotti per uso oftalmico esterno.
- Non utilizzare in caso di ipersensibilità soggettiva o incompatibilità nota verso qualsiasi componente della preparazione.
- Utilizzare il flacone entro 180 giorni dalla prima apertura.
- Tenere fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.
- Tenere lontano da fonti di calore, conservare in luogo asciutto a temperatura compresa tra 5 e 35 °C.
- Non disperdere il contenitore nell'ambiente dopo l'uso.

CONFEZIONE: Flacone da 10 ml con contagocce

USO ESTERNO – SOLO PER USO VETERINARIO

FOR MORE LANGUAGES:

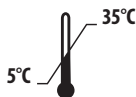

STERILE A

Inquadra QR code per differenziare i rifiuti

FLACONE CONTAGOCCE / TAPPO	EROGATORE	ASTUCCIO	FOGLIETTO ILLUSTRATIVO ETICHETTA
LDPE04	7	PAP21	PAP22
PLASTICA RACCOLTA DIFFERENZIATA		CARTA RACCOLTA DIFFERENZIATA	

Verifica le disposizioni del tuo comune per la gestione dei rifiuti

3BF **trebifarma**
ANIMAL HEALTH

Trebifarma S.r.l., Sede Op. Viale A. G. Des Genèys, 60/62 R, 16148 Genova (Italy)

S-FI-SIC-010-22-03-00